



TANDA

zap™

Naudojimo instrukcija




Dėkojame...

„Zap“ inkštirų sukeltų dėmelių gydymo prietaisas yra kliniškai patvirtintas kaip viena iš pažangiausių priemonių, galinčių greitai išvalyti ir pašalinti inkštirų dėmeles. Intensyvi mėlynoji šviesa suardo inkštirus sukeliančias bakterijas, o garsinė vibracija ir švelnus šildomasis poveikis taip pat veikia poras – jas atveria, todėl sunaikinamos net giliausiai įsiskverbusios bakterijos. **Jokio šalutinio poveikio.**

Jokio skausmo. Geriausia priemonė kovojant su inkštirais!

Prietaiso sudedamosios dalys

- Prietaiso paviršius (1)
- Indikacinė lemputė (2)
- Jungiklis (3)
- Baterijos dėklo dangtelis (4)

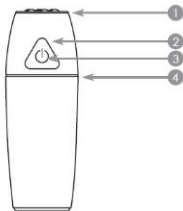

Klientų aptarnavimo skyriaus kontaktai:

UAB „BeautyBalt“

Konstitucijos pr. 23-405, B korpusas, LT-08105, Vilnius

El.p. info@tandalt.lt

Tel.: [+370 696 21152](tel:+37069621152)

Darbo laikas: I-V 09:00 - 18:00 val.

Naudojimo nurodymai

Prietaisas „Zap“ skirtas nedideliems ir vidutinio dydžio uždegiminiams inkštiramams (kelių ar daug uždegiminių (rausvos spalvos) spuogų) gydymui. „Zap“ prietaisas negydo didelių uždegiminių gumbuotų ar pūslėtų spuogų.

Kontraindikacijos

- **ATSARGIAI! Niekada** nenaudokite prietaiso virš didesnio pažeistos odos ploto. Tai gali sulėtinti gydytojo paskirtą gydymo procesą.
- **ATSARGIAI! Neleiskite** naudoti prietaiso vaikams, jaunesniems nei 14 metų. Tai gali sukelti akių sužeidimus.
- **ATSARGIAI!** Nenaudokite prietaiso, jei esate jautrus šviesai. Tai gali sukelti nuspėjamas fotosensibilias reakcijas. Rekomenduojama išbandyti prietaisą ant mažiau jautraus odos lopinėlio (pvz.: dilbio srities).

Šviesos jautrumo testas

Siekdami sužinoti ar esate jautrus šviesai, sekite šių nurodymų:

1. Spustelėkite jungiklį.
2. Prietaisas skleis vibraciją ir švies mėlyna bakterijas naikinančia šviesa.
3. Švelniai priglauskite „Zap“ prietaisą prie savo vidinės rankos dalies odos ploto 2 minučių procedūros ciklui.
4. Dar kartą spustelėkite jungiklį ir pakartokite 2 minučių procedūros ciklą tam pačiam odos lopinėliui.
5. Luktelėkite 24 valandas. Per artimiausias 24 valandas neturėtumėte pajusti neigiamų odos reakcijų.
6. Neigiama odos reakcija įvardinamas skausmas ar diskomfortas, taip pat užsitęsęs paraudimas tame odos plote, kur buvo atliekama procedūra.



- **ATSARGIAI! Nenaudokite** prietaiso, jei naudojate medikamentus, kurie gali turėti poveikį Jūsų jautrumui šviesai. Įprastai medikamentams, kurie gali jautrinti šviesai, priskiriami šie: roaccutane, antihistaminai naudojami alergologų; nesteroidiniai priešūždegiminiai vaistai (NSAID), naudojami kaip priešūždegiminiai ir nuskausminamieji vaistai; taip pat antibiotikai, įskaitant tetraciliną ir sulfonamidus (kitais „Sulfa“ vaistais).
- **ATSARGIAI! Nenaudokite** prietaiso su skystais tepalais, balzmais ar kremais, kurie savo sudėtyje turi karštį generuojančių ingredientų – tai iššaukia odos nudegimus.
- **ATSARGIAI! Nenaudokite** prietaiso virš ar šalia odos ploto, kuriame buvo suleista steroidų injekcija.
- **ATSARGIAI! Nenaudokite** prietaiso akių ar akių vokų plote ir venkite bet kokio akių sąlyčio tiesiogiai su mėlynąja šviesa. Tai gali pakenkti jūsų regėjimui, netgi sukelti aklumą ar laikiną regos praradimą, taip pat tai gali sukelti ir galvos skausmą.
- **ATSARGIAI! Nenaudokite** prietaiso virš kaklo srities odos, nes tai galėtų stimuliuoti liaukas.

Perspėjimai

Dėmesio: Siekiant sumažinti elektros šoko riziką, kuri galėtų sukelti sužalojimus ar net mirtį, rekomenduojame:

- Nelaikykite prietaiso greta vonios ar kriauklės. Jokiu būdu nenardinkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį.
- Niekada nedėkite jokio objekto į atviras prietaiso ertmes.
- Prietaisui naudokite tik rekomenduojamas baterijas.
- Niekada nenaudokite prietaiso žinodami, jog jis veikia netinkamai, buvo sudaužtas ar kitaip pažeistas ar panardintas į vandenį. Grąžinkite prietaisą „Syneron Beauty Ltd.“ tolimesniai problemos identifikavimui bei taisymo darbams.
- Žinodami, jog nesinaudosite prietaisu ilgą laiką (ilgiau nei mėnesį), išimkite baterijas iš prietaiso.
- Jokiu būdu neardykite prietaiso, neišrinkite jo, nes tai gali rimtai pažeisti prietaisą, iššaukti elektros šoką, užsiliepsnoti ar kelti grėsmę jūsų sveikatai. Prietaiso dalis surenka tik „Syneron Beauty Inc.“ specialistai.

Dėmesio: Kad prietaisas neužsiliepsnotų, ir siekiant išvengti nudegimų, rekomenduojame:

1. Laikyti prietaisą toliau nuo greitai užsiliepsnojančių aerosolinių produktų ar vietų, kur yra padidintas deguonies kiekis.

2. Išjungti prietaisą, jei jis neįprastai įkaista.

Dėmesio: Prietaisu nebesinaudokite, jei pajutote neigiamą odos reakciją, ar odai esant paraudus ilgesnį laiko tarpą. Tai gali būti fotosensibili reakcija.

Atsargumo priemonės

- Prieš naudodamiesi prietaisu „Zap“ perskaitykite visas instrukcijas.
- Naudokite šį prietaisą tik pagal paskirtį, kaip tai nurodyta vartotojo atmintinėje. Priešingu atveju, procedūros veikimas gali užsitęsti ilgesnį laiką.
- Nebesinaudokite prietaisu, jei patiriate diskomfortą toje odos vietoje, kur buvo atliekamos procedūros. Tai gali reikšti, jog esate jautrus šviesai.
- Procedūrų metu venkite tiesioginio akių kontakto su prietaiso galvutės skleidžiama šviesa.

▪ Nenaudokite prietaiso procedūroms aplinkoje, kur yra naudojami kiti prietaisai, tokie, kurie skleidžia elektromagnetines bangas ir yra neapsaugoti. Nešiojama ar mobili radijo technika ir kitos komunikacinės priemonės gali neigiamai paveikti medicininę elektrinę įrangą.

Kaip naudotis prietaisu

Atkreipkite dėmesį į tai, kad kai kurie žmonės yra jautrūs šviesai. Jei manote, jog esate jautrus šviesai, rekomenduojama prieš naudojantis „Zap“ prietaisu pasidaryti odos jautrumo šviesai testą. Išsamiau apie šviesos jautrumo testą, skaitykite žemiau.

1. Spustelėkite jungiklį.
2. Prietaisas pradės vibruoti, o iš prietaiso galvutės pasklis baterijas naikinanti mėlynoji šviesa. Venkite bet kokio žvilgsnio ar kitokio akių kontakto su prietaiso galvutės skleidžiama šviesa.
3. Švelniai priglauskite „Zap“ prietaisą 2 minutėms prie dėmėtos odos ploto. Vibracijai sustojus, procedūra pasibaigia.
4. Pakartokite procedūrą 2–3 kartus.

Prietaiso indikatoriai

Pastovi vibracija ir mėlyna šviesa

Vyksta procedūra

Po kiekvienos procedūros jungiklis mirkčioja raudona spalva 10 sekundžių

Prietaiso baterija išsikrauna

Po kiekvienos procedūros jungiklis dega pastoviai raudona spalva 10 sekundžių

Prietaisas vykdys mažiau nei 50 likusių procedūrų

Prietaisas neįsijungia ir jungiklis dega pastoviai raudona spalva 10 sekundžių

Prietaiso procedūrų skaičius baigėsi. Laikas įsigyti naują Zap prietaisą

Prietaiso indikatoriai

„Zap“ prietaisas yra sukurtas 1000 procedūrų. Kai iki pilno „Zap“ prietaiso funkcionuojamų procedūrų skaičiaus pabaigos lieka 50 procedūrų, po kiekvieno procedūros ciklo užsidega ir pastoviai dega raudona lemputė, kuri primena, jog netrukus prietaisą teks pakeisti nauju.


Kai „Zap“ pabaigia 1000 procedūrų, jis daugiau neįsijungs, ir pastoviai degs raudona lemputė.

Baterijos veikimas ir keitimas

Kai Jūsų prietaiso „Zap“ baterijos išsikrauna, po kiekvienos procedūros pradės mirksėti raudona lemputė. Prireikus pakeisti bateriją, naudokite AAA alkalino bateriją (IEC LR03). Siekiant apsaugoti gamtą, rekomenduojama naudoti pakraunamas AAA baterijas (pastaba: naudojant pakraunamas baterijas, baterijos galiojimo trukmė gali skirtis).

Norėdami įdėti ar pakeisti baterijas „Zap“ prietaise, sekite šiais nurodymais:

1. Pasukite prietaiso viršutinę dalį pagal laikrodžio rodyklę taip, kad du trikampiukai, išsidėstę viršutinėje ir apatinėje prietaiso sekcijose, susilygintų.
2. Išimkite panaudotas baterijas iš baterijos laikiklio.
3. Įdėkite 3 naujas AAA baterijas pagal simbolius, nurodytus baterijų laikiklyje.
4. Norėdami uždaryti prietaisą Zap, išlyginkite du trikampiukus, spustelėkite ir sukite prietaiso viršutinę dalį pagal laikrodžio rodyklę tol, kol trikampiukas susilygins su vertikaliu brūkšneliu.

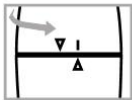

Elektros ir elektronikos įrangos išmetimas (WEEE)



„Zap“ yra laikomas elektriniu prietaisu, ir jį reikia šalinti kaip ir bet kokias kitas elektrines atliekas, kaip to reikalauja vietiniai įstatymai. Įsitinkite, kad išėmėte ir perdirbote panaudotas prietaiso baterijas pagal visas vietines teisės normas.



Šis simbolis reiškia, kad baterijų negalima šalinti kartu su buitinėmis atliekose, nes jose yra medžiagų, kurios gali būti žalingos aplinkai ir sveikatai. Prašome baterijas nunešti į specialius priėmimo punktus.

Prietaiso valymas

Norėdami išvalyti „Zap“ prietaiso paviršių, naudokite drėgną, švelnų, nepūkuotą audinį ir šiek tiek alkoholio neturinčio detergento.

Pastaba: Jokiu būdu namerkite prietaiso į vandenį.

Tanda Zap prietaisas = TANDA SERIES 4



BF TIPO TAIKOMA PUSĖ



Dėmesio, žiūrėkite Lydinčius dokumentus



Laikykitės naudojimo instrukcijų.



Apsaugos laipsniai - TUV sertifikavimo žyma Ipx5

2 RIZIKOS GRUPĖ

Dėmesio: Šis produktas gali skleisti žalingą optinę radiaciją.
Nežiūrėti į veikiančią lemputę. Gali būti žalinga akims.

Naudojimas: aplinkos temperatūra: 5°C - 40°C RH: 15% - 93%, be kondensacijos;

Atmosferinis slėgis: 700 – 1060 Hpa;

Transportavimo/laikymo aplinkos techninės sąlygos:

Aplinkos temperatūra: 0°C - 60°C; RH: 10% - 90%



UAB „BeautyBalt“
Konstitucijos pr. 23-405,
LT-08105, Vilnius
El.p. info@tanda.lt
Tel.: +370 696 21152

TANDA